




Anem a mirar
fitxes



PRODUCTE SANITARI sense contacte amb:

- Mucoses.
- Fluids corporals o secrecions.
- Orificis naturals.

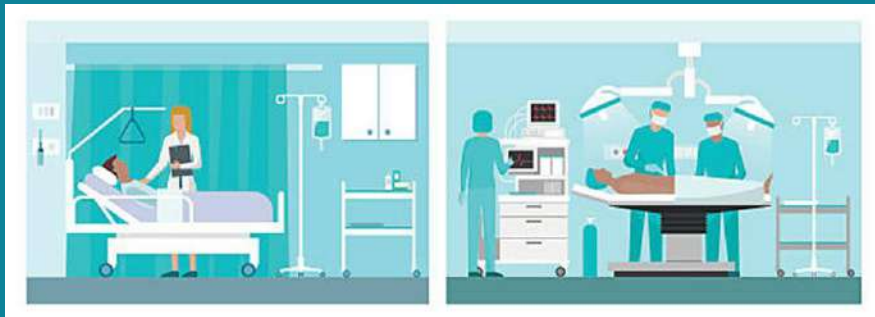


Registre:

- Producte sanitari: classe IIa.
- Marcat CE+nombre.




Desinfectant de baix nivell:

- Bactericida.
- Fungicida/levuricida.

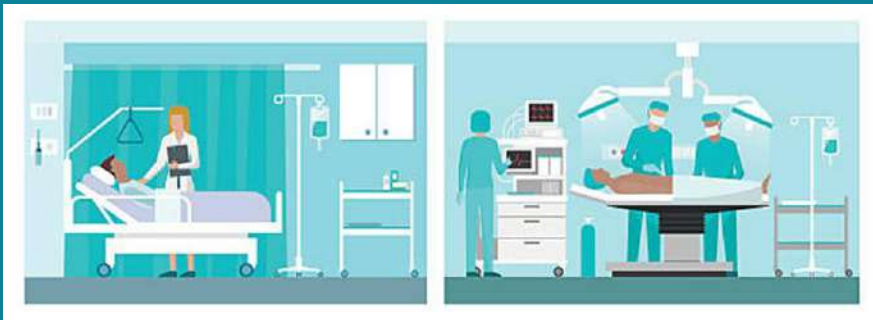

Desinfectant de mig nivell:

- Bactericida.
- Fungicida/levuricida.
- Micobactericida/tuberculicida.
- Virucida.

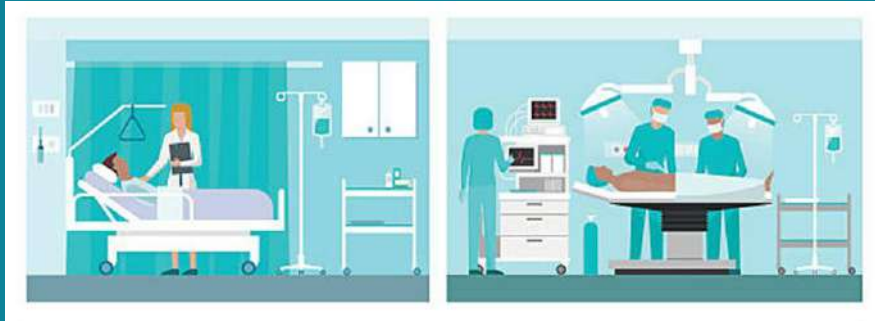


PRODUCTE SANITARI amb contacte amb:

- Mucoses.
- Fluids corporals o secrecions.
- Orificis naturals.



Registre:

- Producte sanitari: classe IIb.
- Marcat CE+nombre.

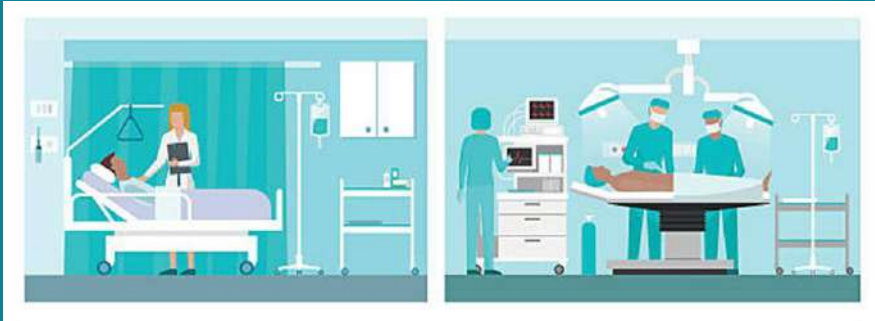

Desinfectant d'alt nivell:

- Bactericida.
- Fungicida/levuricida.
- Micobactericida/tuberculicida.
- Virucida.
- Esporicida.



An illustration of a female doctor with dark hair, wearing a white lab coat and a stethoscope. She is sitting at a desk with a laptop open in front of her. To her left is a small potted plant with green leaves. The background is a light green color with a white diagonal shape on the right side.

Comencem

EXEMPLE 1:

DESCRIPCIÓ DEL DESINFECTANT

- Desinfectant instantani en spray.



REGISTRE

- *Fitxa tècnica:*
 - *No consta la classificació: classe IIa.*
 - *No consta el marcat CE.*

NORMATIVA

E N 1 4 8 8 5	Bactericida	Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida		Fungicida Levuricida			
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	
	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió
	EN 1040	EN 1040	EN 14347	EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562
				Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	

NORMATIVA

E N 1 4 8 8 5	Bactericida	Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida		Fungicida Levuricida			
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	
	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió
	EN 1040	EN 1040	EN 14347	EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562
				Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	
F T		EN 1275 (5-15 min.)		EN 1276 (5-15 min.)			EN 1650 (15 min.)		

NORMATIVA

E N 1 4 8 8 5	Bactericida	Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida		Fungicida Levuricida			
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	
	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió
	EN 1040	EN 1040	EN 14347	EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562
				Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	
F T		EN 1275* (5-15 min.)		EN 1276** (5-15 min.)			EN 1650*** (15 min.)		

*Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida bàsica dels antisèptics i desinfectants químics. Mètode d'assaig i requisits

** Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat bactericida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats a l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits.

*** Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats a l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits

NORMATIVA

E N 1 4 8 8 5	Bactericida	Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida		Fungicida Levuricida			
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	
	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió
	EN 1400	EN 14040	EN 1347	EN 12727	EN 16615	EN 14561	EN 12224	EN 16615	EN 14562
			Bacteries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>	Bacteries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/ Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> <i>Levats</i> <i>C. Albicans</i>	Fongs/ Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> <i>Levats</i> <i>C. Albicans</i>		
F T	EN 1275* (5-15 min.)			EN 1276** (5-15 min.)			EN 1650*** (15 min.)		

*Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida bàsica dels antisèptics i desinfectants químics. Mètode d'assaig i requisits

** Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat bactericida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats a l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits.

*** Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats a l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits

NORMATIVA

✓ Bactericida
 ✓ Fungicida
 ✓ Levuricida


E N	Bactericida	Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida		Fungicida Levuricida			
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	
1 4 8 8 5	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	
	EN 1040	EN 1040	EN 1347	EN 1277	EN 16615	EN 14561	EN 1224	EN 16615	EN 14562
				Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>	Fongs/ Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> <i>Levats</i> <i>C. Albicans</i>	Fongs/ Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> <i>Levats</i> <i>C. Albicans</i>		
F T		EN 1275* (5-15 min.)		EN 1276** (5-15 min.)			EN 1650*** (15 min.)		

*Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida bàsica dels antisèptics i desinfectants químics. Mètode d'assaig i requisits

** Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat bactericida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats a l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits.

*** Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats a l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits

EXEMPLE 1:

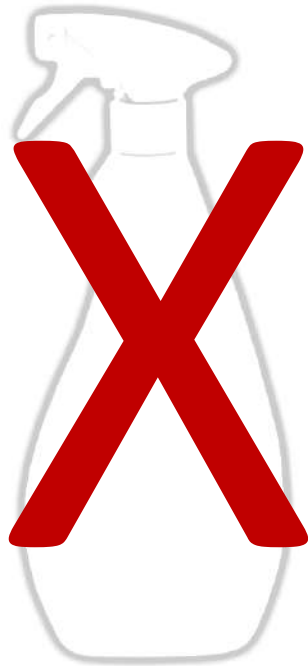

CONCLUSIÓ

- *No és un desinfectant ús hospitalari.*

EXEMPLE 2:

DESCRIPCIÓ DEL DESINFECTANT

- Tovallolletes netejadores desinfectants per superfícies, petit material i dispositius mèdics no invasius.



REGISTRE

Dispositiu mèdic classe IIa

A la mateixa fitxa diu: ... *“El aclarado es ineficaz, a menos que el dispositivo médico pueda estar en contacto con las membranas mucosas”...*

- *Fitxa tècnica:*
 - *No consta la classificació: classe IIa.*
 - *No consta el marcat CE.*

NORMATIVA

E
N

1
4
8
8
5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida		
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1		
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió		
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>

NORMATIVA

E
N
1
4
8
8
5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1			
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió			
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476			
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculicida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>	

F
T

EN 13727 EN 1276	EN 13697	EN 14561 (SARM) (5 min.)	EN 13624 EN 1650	EN 13697	Fungicida EN 14562 <i>C. albicans</i> (5 min.) <i>A. fumigatus</i> (5 min.) Levuricida EN 14562 <i>C. Albicans</i> (5 min.)	Tuberculicida EN 14348 <i>M. Terrae</i> (5 min.)	Tuberculicida EN 14563 <i>M. Terrae</i> (5 min.)	V. encapsulats <i>HBV HCV</i> <i>Coronavirus</i> <i>RSV</i> <i>H1N1</i> <i>HSV-1</i>	V espectre limitat <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Rotavirus</i> (15 min.)	Virucida <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Polyomavirus</i> (1 min.)
---------------------	----------	--------------------------------	---------------------	----------	--	--	--	--	---	---

NORMATIVA

E
N

1
4
8
8
5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1			
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió			
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476			
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>	

F
T

EN 1276	EN 13697		EN 1650	EN 13697						
----------------	-----------------	--	----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

NORMATIVA

E N 1 4 8 8 5	Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida		
	FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1		
	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió		
	EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		
	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>
EN 1276*	EN 13697**		EN 1650***	EN 13697**							
F T											

• Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat bactericida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats a l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional.

** Assaig quantitatiu de superfície no porosa per a l'avaluació de l'activitat bactericida i levuricida i/o fungicida de desinfectants químics utilitzats en àrees alimentàries, industrials, domèstiques i institucionals sense acció mecànica .

*** Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats a l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits .

NORMATIVA

E
N

1
4
8
8
5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1			
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió			
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476			
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>	

F
T

EN 13727		EN 14561 (SARM) (5 min.)	EN 13624		Fungicida EN 14562 <i>C. albicans</i> (5 min.) <i>A. fumigatus</i> (5 min.)	Tuberculocida EN 14348 <i>M. Terrae</i> (5 min.)	Tuberculocida EN 14563 <i>M. Terrae</i> (5 min.)	V. encapsulats HBV HCV Coronavirus RSV H1N1 HSV-1	V espectre limitat <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Rotavirus</i> (15 min.)	Virucida <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Polyomavirus</i> (1 min.)
					Levuricida EN 14562 <i>C. Albicans</i> (5 min.)					

NORMATIVA

E
N
1
4
8
8
5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida		
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1		
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió		
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Micobactericida: <i>M. Terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>	Micobactericida: <i>M. Terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>	V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>

F
T

EN 13727		EN 14561 (SARM) <i>(5 min.)</i>	EN 13624		Fungicida EN 14562 <i>C. albicans</i> <i>(5 min.)</i> A. fumigatus <i>(5 min.)</i>	Tuberculocida EN 14348 <i>M. Terrae</i> <i>(5 min.)</i>	Tuberculocida EN 14563 <i>M. Terrae</i> <i>(5 min.)</i>	V. encapsulats <i>HBV HCV</i> <i>Coronavirus</i> <i>RSV</i> <i>H1N1</i> <i>HSV-1</i>	V espectre limitat <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Rotavirus</i> <i>(15 min.)</i>	Virucida <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Polyomavirus</i> <i>(1 min.)</i>
					Levuricida EN 14562 <i>C. Albicans</i> <i>(5 min.)</i>				↑	

NORMATIVA

- ✓ Bactericida 2-1
- ✓ Fungicida 2-1
- ✓ Levuricida 2-1 i 2-2
- ✓ **Micobactericida**
- ✓ Tuberculicida 2-1 i 2-2
- ✓ Virucida

E
N

1
4
8
8
5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida		
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió		
EN 13727	EN 16615	EN 1561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 1563	EN 14476		
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> (<i>Niger</i>) Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. Terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculicida: <i>M. terrae</i>	V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>	

F
T

EN 13727 EN 1276*	EN 13697**	EN 14561 (SARM) (5 min.) ↑	EN 13624 EN 1650***	EN 13697**	Fungicida EN 14562 <i>C. albicans</i> (5 min.) <i>A. fumigatus</i> (5 min.) Levuricida EN 14562 <i>C. Albicans</i> (5 min.) ↑	Tuberculicida EN 14348 <i>M. Terrae</i> (5 min.) ↑	Tuberculicida EN 14563 <i>M. Terrae</i> (5 min.) ↑	V. encapsulats HBV HCV Coronavirus RSV H1N1 HSV-1	V espectre limitat <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Rotavirus</i> (15 min.) ↑	Virucida <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Polyomavirus</i> (1 min.)
----------------------	------------	-------------------------------------	------------------------	------------	---	--	--	---	---	--



EXEMPLE 2:



CONCLUSIÓ

- No compleix la normativa EN16615.
- Efectiu rotavirus en 15 minuts.
- Evitar posar-la a la unitat de pediatria o sociosanitari.

EXEMPLE 3:

DESCRIPCIÓ DEL DESINFECTANT

- Tovallolletes desinfectant individuals d'un sol ús.
- Tovallolletes desinfectant per superfícies no poroses i productes sanitaris no invasius, abans de fer una esterilització o desinfecció d'alt nivell.



REGISTRE

- *Fitxa tècnica:*
 - *Consta la classificació: classe IIa.*
 - *Consta el marcat CE.*

NORMATIVA

E
N
1
4
8
8
5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1			
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió			
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476			
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>	

NORMATIVA

E
N
1
4
8
8
5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1			
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió			
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476			
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>	

F
T

EN 13727 (30 seg.)	EN 16615 (1 min.)		EN 13624 Llevats <i>C. Albicans</i> (30 seg.)	EN 16615 Llevats <i>C. Albicans</i> (1 min.)		Tuberculocida: <i>M. terrae</i> (2 min.)		EN 14476 VACV HBC HCV HIV H5N1 SARS Coronavirus (30 seg.)	EN 14476 Noravirus (30 seg.)	
-------------------------------------	------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	---	--

NORMATIVA

E
N
1
4
8
8
5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1			
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió			
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476			
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasilensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasilensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Noravirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Noravirus</i> <i>Poliovirus</i>	

F
T

EN 13727 (30 seg.)	EN 16615 (1 min.)		EN 13624 Llevats <i>C. Albicans</i> (30 seg.)	EN 16615 Llevats <i>C. Albicans</i> (1 min.)		Tuberculocida: <i>M. terrae</i> (2 min.)		EN 14476 VACV HBC HCV HIV H5N1 SARS Coronavirus (30 seg.)	EN 14476 Noravirus (30 seg.)	
-------------------------------------	------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	---	--

NORMATIVA

✓ Bactericida 2-1 i 2-2
 ✓ Fungicida
 ✓ Levuricida 2-1 i 2-2
 ✓ Micobactericida
 ✓ Tuberculicida 2-1 i 2-2
 ✓ Virucida virus encapsulats

E
 N
 1
 4
 8
 8
 5

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida		
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1		
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió		
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		 Fongs/espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasilensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i> 	 Fongs/espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasilensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i> 		 Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculicida: <i>M. terrae</i> 		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	 V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Noravirus</i> 	 Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Noravirus</i> <i>Poliovirus</i>

F
T

EN 13727 (30 seg.)	EN 16615 (1 min.)		EN 13624 Llevats <i>C. Albicans</i> (30 seg.)	EN 16615 Llevats <i>C. Albicans</i> (1 min.)		Tuberculicida: <i>M. terrae</i> (2 min.)		EN 14476 VACV HBC HCV HIV H5N1 SARS Coronavirus (30 seg.)	EN 14476 Noravirus (30 seg.)	
------------------------------	-----------------------------	--	---	--	--	---	--	--	---	--

EXEMPLE 3:



CONCLUSIÓ

- No compleix normativa *Adenovirus*:
 - Infeccions gàstriques, conjuntivitis i infeccions respiratòries.
- No compleix normativa *Norovirus*:
 - Vòmits i diarrees.

EXEMPLE 4:

DESCRIPCIÓ DEL DESINFECTANT

- Tovallolletes per la desinfecció material sanitari i equips mèdics com equipament quirúrgic, ecografs, bombes d'infusió, incubadores o llits.



REGISTRE

- *Fitxa tècnica:*
 - *No consta la classificació.*
 - *Consta el marcat CE.*

NORMATIVA

E N 1 4 8 8 5	Bactericida	Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida		
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1		
	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió		
	EN 1040	EN 1040	EN 14347	EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		
				Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Micobactericida <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		

NORMATIVA

E N 1 4 8 8 5	Bactericida	Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida	Virucida			
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		
	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió		
EN 1040	EN 1040	EN 14347	EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476			
			Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>	
F T	EN 1040 (2 min.)	EN 1040 (2 min.) EN 1275 (2 min.)		EN 1276 (2 min.)			EN 13624 <i>A Brasiliensis</i> (1 min.)			Micobacteries <i>M. terrae</i> (1-3 min.)			EN 14476 Rotavirus (2min)	Norovirus Poliomavirus (5 min.)

NORMATIVA

E N	Bactericida	Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida	Virucida			
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1		
1 4 8 8 5	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió		
	EN 1040	EN 1040	EN 14347	EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		
			Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>	
F T		EN 1275* (2 min.)		EN 1276* (2 min.)										

*Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida bàsica dels antisèptics i desinfectants químics

**Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat bactericida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats a l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Mètode d'assaig i requisits

NORMATIVA

E N	Bactericida	Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida	
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1	
1 4 8 8 5	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió	
	EN 1040	EN 1040	EN 14347	EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476	
			Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>
F T	EN 1040 (2 min.)	EN 1040 (2 min.)				EN 13624 <i>A Brasiliensis</i> (1 min.)			Micobacteries <i>M. terrae</i> (1-3 min.)			EN 14476 Rotavirus (2min)	Norovirus Poliomavirus (5 min.)

NORMATIVA

- ✓ Bactericida
- ✓ Fungicida
- ✓ Levuricida
- ✓ Micobactericida
- ✓ Tuberculicida 2-1
- ✓ Virucida

E N 1 4 8 8 5		Fungicida Levuricida	Esporicida	Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida		
	FASE 1			FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS 1		
	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectants superfície / per immersió		
	EN 1040	EN 1040	EN 14347	EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		
				Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Micobactericida <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		
F T	EN 1040 (2 min.)	EN 1040 (2 min.) EN 1275 (2 min.)		EN 1276 (2 min.)			EN 13624 <i>A Brasiliensis</i> (1 min.)			Tuberculocida <i>M. terrae</i> (1-3 min.)			EN 14476 Rotavirus (2min)	Norovirus Poliomavirus (5 min.)

EXEMPLE 4:



CONCLUSIÓ

- No compleix normativa.
- Si que té normativa DVV/RKI.

EXEMPLE 5:

DESCRIPCIÓ DEL DESINFECTANT

- Tovallolletes detergent esporicida.



REGISTRE

- *Registre: :*
 - *No producte sanitari classe IIb.*
 - *No marcat CE.*

NORMATIVA

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i>

NORMATIVA

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i>

FT

EN 13727 (30 seg.)	EN 16615 (30 seg.)		EN 13624	EN 16615 <i>C. Albicans</i> (30 seg.) <i>A. Brasiliensis</i> (1 min.)		EN 14348 EN 16615 (3 min.)			EN 14476 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.)	EN 14476 EN 16615 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.) <i>Poliovirus</i> (3 min.)		EN 13704 EN 16615 <i>C. difficile</i> (1 min.) <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i> (2 min.)
------------------------------	------------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	---	---	--	---

NORMATIVA

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i>

FT

												EN 13704 <i>C. difficile</i> (1 min.) <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i> (2 min.)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NORMATIVA

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i>

FT

												EN 13704 <i>C. difficile</i> (1 min.) <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i> (2 min.)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat esporicida dels desinfectants químics utilitzats en productes alimentaris, a la indústria, a la llar i a col·lectivitats

NORMATIVA

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i>

FT

EN 13727 (30 seg.)	EN 16615 (30 seg.)		EN 13624	EN 16615 <i>C. Albicans</i> (30 seg.) <i>A. Brasiliensis</i> (1 min.)		EN 14348 EN 16615 (3 min.)			EN 14476 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.)	EN 14476 EN 16615 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.) <i>Poliovirus</i> (3 min.)		EN 16615
------------------------------	------------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	---	---	--	-----------------

NORMATIVA

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. en capsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B. cereus</i>

FT

EN 13727 <i>(30 seg.)</i>	EN 16615 <i>(30 seg.)</i>		EN 13624	EN 16615 <i>C. Albicans</i> (30 seg.) <i>A. Brasiliensis</i> (1 min.)		EN 14348 EN 16615 (3 min.)			EN 14476 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.)	EN 14476 EN 16615 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.) <i>Poliovirus</i> (3 min.)		EN 16615
-------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------	--	--	---	--	--	--	---	--	-----------------

NORMATIVA

- ✓ Bactericida 2-1 i 2-2
- ✓ Fungicida 2-1 i 2-2
- ✓ Levuricida 2-1 i 2-2
- ✓ Micobactericida 2-1 i 2-2
- ✓ Tuberculicida 2-1 i 2-2
- ✓ Virucida excepte virus encapsulats
- ✓ **Esporicida**

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculicida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B. cereus</i>

FT

EN 13727 (30 seg.)	EN 16615 (30 seg.)		EN 13624	EN 16615 <i>C. Albicans</i> (30 seg.) <i>A. Brasiliensis</i> (1 min.)		EN 14348 EN 16615 (3 min.)			EN 14476 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.)	EN 14476 EN 16615 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.) <i>Poliovirus</i> (3 min.)		EN 16615
------------------------------	------------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	---	---	--	-----------------

NORMATIVA

- ✓ Bactericida 2-1 i 2-2
- ✓ Fungicida 2-1 i 2-2
- ✓ Levuricida 2-1 i 2-2
- ✓ Micobactericida 2-1 i 2-2
- ✓ Tuberculicida 2-1 i 2-2
- ✓ Virucida excepte virus encapsulats
- ✓ **Esporicida**

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculicida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espore: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B. cereus</i>

F T

EN 13727 (30 seg.)	EN 16615 (30 seg.)		EN 13624	EN 16615 <i>C. Albicans</i> (30 seg.) <i>A. Brasiliensis</i> (1 min.)		EN 14348 EN 16615 (3 min.)			EN 14476 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.)	EN 14476 EN 16615 <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> (30 seg.) <i>Poliovirus</i> (3 min.)		EN 16615
------------------------------	------------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	---	---	--	-----------------

EXEMPLE 5:



CONCLUSIÓ

- Malgrat que la fitxa tècnica diu que és esporicida no compleix la EN 17126.
- No passa la normativa pels virus encapsulats.

EXEMPLE 6:

DESCRIPCIÓ DEL DESINFECTANT

- Desinfectant d'alt nivell per productes sanitaris: equipament mèdic i quirúrgic i equipament endoscòpic termosensible.



REGISTRE

- *Registre:*
 - *No producte sanitari classe IIIa.*
 - *Si marcat CE.*

NORMATIVA

- ✓ Bactericida 2-1 i 2-2
- ✓ Fungicida 2-1 i 2-2
- ✓ Levuricida 2-1 i 2-2
- ✓ Micobactericida 2-1 i 2-2
- ✓ Tuberculicida 2-1 i 2-2
- ✓ Virucida excepte virus encapsulats
- ✓ Esporicida

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculicida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i>

FT

EN 13727 (5 min.)		EN 14561 (5 min.)	EN 13624 (5 min.)		EN 14562 (5 min.)	EN 14348 (5 min.)	EN 14562 (5 min.)		Adenovirus Norovirus (5 min.)	EN 14476 (5 min.)	EN 17111 (5 min.)	EN 17126 Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> (5 min.)
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	---

NORMATIVA

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i>

NORMATIVA

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculocida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i>

FT

EN 13727 (5 min.)		EN 14561 (5 min.)	EN 13624 (5 min.)		EN 14562 (5 min.)	EN 14348 (5 min.)	EN 14562 (5 min.)		Adenovirus Norovirus (5 min.)	EN 14476 (5 min.)	EN 17111 (5 min.)	EN 17126 Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> (5 min.)
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	---

NORMATIVA

- ✓ Bactericida 2-1 i 2-2
- ✓ Fungicida 2-1 i 2-2
- ✓ Levuricida 2-1 i 2-2
- ✓ Micobactericida 2-1 i 2-2
- ✓ Tuberculicida 2-1 i 2-2
- ✓ Virucida excepte virus encapsulats
- ✓ Esporicida

EN 14885

Bactericida			Fungicida Levuricida			Micobacteries Tuberculocida		Virucida			Esporicida	
FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 - PAS 2		FASE 2 - PAS1	FASE 2 -PAS 2	FASE 2 - PAS1		FASE 2-PAS 2	FASE 2 PAS1	
Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectant acció mecànica	Desinfectant per immersió	Desinfectant per immersió	Desinfectants per immersió	Desinfectant superfície / per immersió		Desinfectants per immersió	Desinfectant per immersió	
EN 13727	EN 16615	EN 14561	EN 13624	EN 16615	EN 14562	EN 14348	EN 14563	EN 14476		EN 17111	EN 17126	
Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. Coli</i> <i>E. hirae</i>	Bactèries: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>E. hirae</i>		Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>	Fongs/Espores: <i>C. Albicans</i> <i>A. Brasiliensis (Niger)</i> Llevats: <i>C. Albicans</i>		Micobactericida: <i>M. terrae</i> <i>M. avium</i> Tuberculicida: <i>M. terrae</i>		V. encapsulats: <i>Vaccinia virus</i>	V. Espectre limitat: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	Virucida: <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>		Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> <i>B: cereus</i>

FT

EN 13727 (5 min.)		EN 14561 (5 min.)	EN 13624 (5 min.)		EN 14562 (5 min.)	EN 14348 (5 min.)	EN 14562 (5 min.)		Adenovirus Norovirus (5 min.)	EN 14476 (5 min.)	EN 17111 (5 min.)	EN 17126 Espores: <i>C. difficile</i> <i>B. subtilis</i> (5 min.)
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	---

EXEMPLE 6:



CONCLUSIÓ

CONCLUSIÓ

- Ampli espectre antimicrobià.
- Ràpida acció.
- Producte estable.
- Cost- eficiència.
- Preparació fàcil.
- Caducitats.
- Tipus de material.
- Baixa toxicitat.
- Acceptació del personal.



QUÈ ESTIC BUSCANT

